

## VIBRERENDE VOETMASSAGE MET INFRAROODLAMP



**Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaren en daarboven en personen met gereduceerde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder supervisie staan of instructie krijgen betreffende het gebruik van dit apparaat op een veilige manier en de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen moeten niet spelen met dit apparaat. Reiniging en onderhoud door gebruiker moet niet gedaan worden door kinderen zonder supervisie.**

Lees alstublieft de voorwaarden alvorens het gebruik van deze dienst, en bewaar deze voorwaarden zorgvuldig voor later gebruik.

**A. GEZONDHEIDSMATREGELEN**

Bij de volgende lichamelijke condities dit toestel pas gebruiken na doktersraadpleging:

- zwangerschap
- hartproblemen, vooral mensen met een pacemaker
- diabetes
- tuberculose
- goedaardige of kwaadaardige gezwellen
- andere gezondheidsproblemen

Behoudens toestemming van de dokter dit massagetoestel niet gebruiken op lichaamsdelen die de volgende aandoeningen vertonen:

- bloedingen,
- kwetsuren,
- zwellingen,
- huiduitslag,
- verbrande huid,
- spataders,
- open wondjes,
- slechte doorbloeding,
- blauwe plekken,
- beschadigde huid,
- flebitis,

- trombose,
- verlamings- of verdovingsverschijnselen, onverklaarbare pijn in de gemasseerde zone, het optreden van spierof gewrichtspijn binnen 72 uur na de behandeling.

## **B. VEILIGHEIDSMATREGELEN**

### **LEES ALLE VOORSCHRIFTEN GRONDIG VOORDAT JE DIT TOESTEL GAAT GEBRUIKEN**

#### **1. GEVAAR**

##### **Om het risico op elektrische schokken te beperken:**

- 1) Wanneer het toestel niet wordt gebruikt, dit onmiddellijk uit het stopcontact trekken. Ook wanneer je er accessoires wilt op plaatsen of het toestel wilt reinigen.
- 2) Het toestel **NIET GEBRUIKEN** in het bad of tijdens je slaap.
- 3) Een toestel dat in het water is gevallen **NIET** aanraken. Onmiddellijk uit het stopcontact trekken.
- 4) Het toestel **NIET** in water of andere vloeistoffen onderdompelen of laten vallen.
- 5) Bij het neerzetten of opbergen van het toestel ervoor zorgen dat het **NIET** in het bad of de wasbak kan vallen.
- 6) **NIET** op het toestel gaan staan.

#### **2. WAARSCHUWING**

##### **Om de kans op brand, elektrische schokken, brandwonden of kwetsuren te beperken:**

- 1) Een ingestoken toestel mag nooit onbewaakt worden achtergelaten. Wanneer het toestel niet wordt gebruikt, dit steeds uit het stopcontact trekken. Doe dit ook voordat je accessoires op het toestel gaat plaatsen of deze accessoires wilt verwijderen en als je het toestel wilt reinigen.
- 2) Opgepast voor het warme oppervlak, want dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.
- 3) Het toestel heeft een warm oppervlak. Mensen die gevoelig zijn aan warmte moeten dit dus uiterst voorzichtig gebruiken.
- 4) **NIET** gebruiken op gevoelloze huid of op plaatsen met slechte bloeddorstroming.
- 5) **NIET** gebruiken wanneer de stroomkabel of de stekker is beschadigd, het toestel zelf niet goed werkt of eveneens is beschadigd en ook niet wanneer het in het water is gevallen.
- 6) **NIET** buiten de eigen woning gebruiken. Dit toestel is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- 7) Zorg ervoor dat de kabel niet in contact komt met warmtebronnen, water of andere vloeistoffen.
- 8) **NIET** gebruiken onder een deken of een kussen. Door oververhitting kan er brand ontstaan; elektrische schokken en kwetsuren zijn ook mogelijk.
- 9) De stroomkabel **NIET** gebruiken om het toestel te dragen of als handvat.
- 10) Het toestel enkel gebruiken voor de doeleinden die beschreven zijn in deze gebruiksaanwijzing.
- 11) **ALLEEN** accessoires gebruiken die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- 12) **NOOIT** voorwerpen in de openingen steken of erin laten vallen.
- 13) **NIET** gebruiken in de nabijheid van spuitbussen of op plaatsen waar zuurstof wordt toegediend.


14) Om het toestel los te koppelen enkel de stekker uittrekken. Wel eerst alle functies uitschakelen.

15) **OPGELET:** NIET langer dan 20 minuten continu gebruiken.

**Indien een vervelend gevoel optreedt, zet u de vibrerende voetmassage uit. De volgende keer dat u het apparaat gebruikt, raden we aan dat u met een sessie van maximaal 10 minuten begint.**

16) Zet het apparaat niet aan wanneer u beschadigingen constateert aan het apparaat, het snoer of de stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Breng het complete apparaat terug naar een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen. Er moet een gelijksoortig snoer worden gebruikt.

### C. BESCHRIJVING

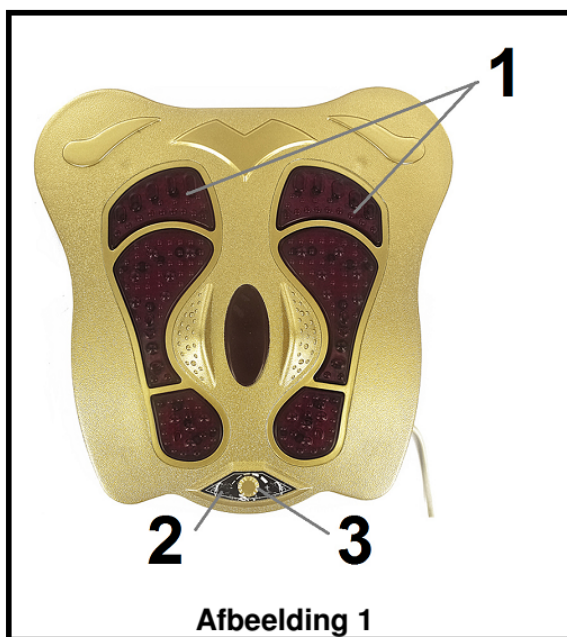

**1. Stralingsgebied van infrarood warmte**

**2. LED voeding**

**3. Knop AAN/UIT – Knop voor het regelen van de intensiteit van de massage met vibratie**

Afbeelding 1

### D. FUNCTIES

- Deze innovatieve voet massage heeft 3 welzijns functies
  1. Vibrerende massage voor ontspanning,
  2. infrarood warmte om te kalmeren,
  3. reflexotherapie om de stofwisseling te stimuleren.
- Instelbare snelheid van vibratie massage

## E. GEBRUIK


- 1) Plaats het toestel stevig op de vloer en steek vervolgens de stroomkabel in een stopcontact.
- 2) In positie zitten op een stoel of in een stoel of een bank plaats beide voeten comfortabel op de massagetoestel.

**OPGELET: NOOIT** gaan rechtstaan op het massagetoestel.

- 3) Schakel de massagetoestel, draai de knop (3) in de richting van de klok: de led (2) en de LEDs branden (1), en de vibratie vastklijkt
- 4) Draai de knop voor het instellen van de intensiteit tot de gewenste intensiteit van de vibratie. Om de intensiteit te verminderen, draai de knop linksom.

**Opmerking:** De massagetoestel voor voeten levert verschillende intensiteiten van vibratie: van laag naar hoog. Deze intensiteiten worden verkregen door het draaien van de knop tot de gewenste intensiteit van de vibratie bereikt is.

- 5) Na een paar minuten bij het gebruik van de massagetoestel voor voeten, is de warmte voelbaar en blijft continu tot het uitschakelen van het apparaat.
- 6) Als u de massagetoestel voor voeten stoppen wilt, draai de knop linksom voor de totale afsluiting van de massagetoestel. EEN klik is hoorbaar om aan te geven dat de stimulatie voor de voeten is stopgezet.

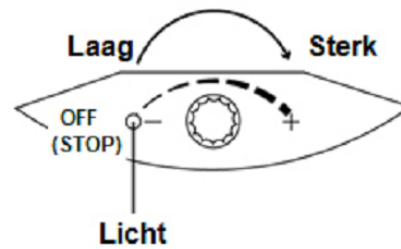

Afbeelding 2

## F. SPECIFICATIES

230V~ 50Hz, 20W

## G. ONDERHOUD

- Reinig de vibrerende voetmassage met een droge doek of handdoek zonder water. De onderdelen die in direct contact komen met de huid kunnen worden ontsmet met alcohol.
- Gebruik geen benzine of andere oplosbare middelen om de voetmassage te reinigen.
- Bewaar de vibrerende voetmassage bij lage temperaturen, en op een droge, geventileerde plaats.

## H. PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
Druk op AAN/UIT, maar de infrarood voet verwarmings emissie functie gaat niet aan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kijk eerst of het apparaat AAN staat.</li><li>2. Zet het apparaat uit en begin opnieuw, kijk of het apparaat nu wel normaal functioneert.</li><li>3. Kijk of de stekker goed in het stopcontact zit.</li></ol>

**LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden.**

**Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.**



**Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.**

**Als het elektriciteits snoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.**